


# TRANSILUMINATOR UV (STANDARD I DUAL)



## INNE ZDJĘCIA

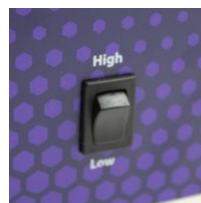

## OPIS OGÓLNY

Transiluminatory dostępne w rozmiarach filtra 21 x 21 cm i 26 x 21 cm są dostarczane jako samodzielne jednostki lub z MicroDOC, jako część w pełni zintegrowanego systemu dokumentacji żelowej. Dzięki dużej powierzchni każdy transiluminator stanowi idealne stanowisko robocze do oglądania i pracy z barwionymi fluorescencyjnie żelami białkowymi i kwasami nukleinowymi.

Standardowe funkcje obejmują wyłącznik bezpieczeństwa wysokiej / niskiej intensywności i wydajny starter, który umożliwia szybkie zasilenie każdej z sześciu 8-watowych lamp UV bez migotania, a specjalne szkło filtrujące minimalizuje niepożądane światło tła. Wszystkie te funkcje maksymalizują kontrast i czułość, umożliwiając oglądanie nawet najślabszych żeli fluorescencyjnych. Dwa modele o podwójnej długości fali zapewniają dodatkową elastyczność i wygodę.

Do standardowych wymagań dotyczących dokumentacji żelowej zalecamy transiluminator o długości fali 312 nm. Transiluminatory o długości fali 254 nm spowodują więcej uszkodzeń DNA i nadają się do innych zastosowań, takich jak sieciowanie. Przez filtr mogą być również widoczne lampy o długości fali 254 nm, co czyni je nieodpowiednimi do dokumentacji żelowej.

### Właściwości:

- wersja z jedną długością fali: 254 lub 312 lub 365 nm:
  - model S: wielkość filtra 21 x 21,
  - model L: wielkość filtra 26 x 21,
- wersja z dwoma długościami fali: 254/312; 254/365; 312/365 nm:
  - model S: wielkość filtra 21 x 21,
  - model L: wielkość filtra 26 x 21,
- wysokiej wydajności reflektor,
- przełącznik wysoka / niska intensywność.

---

## MODELE

- **CSLUVTS254** – transiluminator UV, mały, 254 nm, 21 x 21 cm
- **CSLUVTS312** – transiluminator UV, mały, 312 nm, 21 x 21 cm
- **CSLUVTS365** – transiluminator UV, mały, 365 nm, 21 x 21 cm
- **CSLUVTDUO** – transiluminator UV mały, 254/365 nm, 21 x 21 cm
- **CSLUVTDUO312** – transiluminator UV mały, 254/312 nm, 21 x 21 cm
- **CSLUVTDUO365** – transiluminator UV mały, 254/365 nm, 21 x 21 cm
- **CSLUVTS254L** – transiluminator UV duży, 254 nm, 26 x 21 cm
- **CSLUVTS312L** – transiluminator UV duży, 312 nm, 26 x 21 cm
- **CSLUVTS365L** – transiluminator UV duży, 365 nm, 26 x 21 cm
- **CSLUVTDUOL** – transiluminator UV duży, 254/365 nm, 26 x 21 cm
- **CSLUVTDUO312L** – transiluminator UV duży, 254/312 nm, 26 x 21 cm
- **CSLUVTDUO365L** – transiluminator UV duży, 254/365 nm, 26 x 21 cm

---

## CERTYFIKATY

CE

---

## SPECYFIKACJA

| Transiluminator UV - mały rozmiar filtra |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Rozmiar filtra [cm]                      | 21 x 21        |
| Źródło światła                           | 8 W x 6        |
| Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]      | 34 x 29,5 x 10 |
| Transiluminator UV - duży rozmiar filtra |                |
| Rozmiar filtra [cm]                      | 26 x 21        |
| Źródło światła                           | 8 W x 8        |
| Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]      | 34 x 29,5 x 10 |

---

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ekran konwertujący UV do światła białego,
- boks światła białego,
- promiennik UV 8 W (254 nm, 312 nm lub 365 nm).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl