

PID: BS-010155-AAG

UID: 002-07-1-PSU-2T-0


Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024 14:01



WYTRZĄSARKA DO MIKROPŁYTEK PSU-2T



INNE ZDJĘCIA

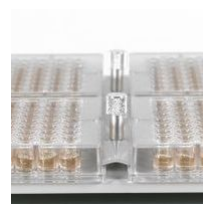

OPIS OGÓLNY

Wytrząsarka **PSU-2T** umożliwia wytrząsanie dwóch lub czterech mikroplatek 96-dołkowych z regulowaną prędkością wytrząsania. Zwarta kompaktowa obudowa, niewielkie rozmiary powodują, że znakomicie sprawdza się w małych laboratoriach jako urządzenie „osobiste” dla wydzielonych zadań takich jak np. testy immunologiczne.

Bezpośredni mechanizm napędowy oraz silnik bezszczotkowy sprawiają, że urządzenie jest jeszcze bardziej niezawodnym narzędziem pracy, zwłaszcza w trybie pracy ciągłej.

Wytrząsarkę można stosować w chłodni lub w inkubatorach w temperaturach z zakresu od +4°C do +40°C.

MODELE

- **PSU-2T**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	PSU-2T
Zakres prędkości obrotów [obr./min]	150-1200
Max. czas trybu pracy ciągłej [godz.]	168
Timer cyfrowy	1 min - 24 godz. / non-stop
Średnica ruchu [mm]	2
Wymiary (W x D x H) [mm]	255 x 255 x 100

Waga [kg]	2
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3,4
Wyposażenie	wersja standardowa IPP2 - 2 mikroplatki 96-dołkowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- platforma **IPP-4** (4 mikroplatki).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl