


WIRÓWKO-WORTEKS FVL-2400N COMBISPIN



INNE ZDJĘCIA

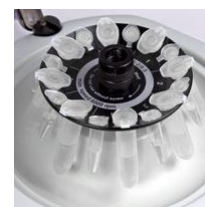

OPIS OGÓLNY

Miniwirówko-worteks **FVL-2400N Combi-Spin** jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do stosowania w badaniach inżynierii genetycznej (np. dla eksperymentów PCR). Może być stosowany w mikrobiologii, biochemii, laboratoriach klinicznych i biotechnologii przemysłowej. Wirówko-worteks **FVL-2400N Combi-Spin** umożliwia jednocześnie mieszanie i odwirowywanie próbek przy użyciu modułu wirowania i worteksowania. **FVL-2400N CombiSpin** wyposażony jest w mechanizm zatrzymania wirówki, gdy pokrywa jest otwarta.

Wirówko-worteks FVL-2400N Combi-Spin jest w standardzie wyposażony w rotor R-1.5 (12 x 1,5 mL) oraz R-0.5/0.2 (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL).

MODELE

- **FVL-2400N Combi-Spin**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	FVL-2400N Combi-Spin
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	190 x 235 x 125
Waga [kg]	1,7
Zatrzymuje pracę przy otwarciu pokrywy	tak
Stała prędkość wirowania [obr./min]	2800
Max. przyspieszenie odśrodkowe [x g]	500
Tryb pracy	ciągły lub impulsowy
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	30
Rotory w standardzie	R-1.5 (12 x 1,5 mL) R-0.5/0.2 (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Rotory opcjonalne:

- **R-2/0.5/0.2** (6 x 2 mL + 6 x 0,5 mL + 6 x 0,2 mL),
- **R-2/0.5** (8 x 2 mL + 8 x 0,5 mL),
- **SR-16** (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),
- **SR-32** (4 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach lub 32 x 0,2 mL do stosowania z modelami produkowanymi od 2015 r.).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl