


URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI H₂O₂ MAŁYCH POMIESZCZEŃ PHILEAS® 25



INNE ZDJĘCIA

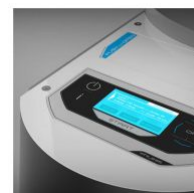

OPIS OGÓLNY

Phileas® 25 to idealne urządzenie mobilne do dekontaminacji H₂O₂ urządzeń oraz pomieszczeń o małej kubaturze, wyposażone w ergonomiczne uchwyty do łatwego przenoszenia. Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki wielocyklowemu programowi możliwa jest dezynfekcja urządzeń m.in. takich jak izolatory, RABS, BSC. Urządzenie wykorzystujące metodę „suchej mgły”, oparte na technologii wirującego dysku. Wysoka wydajność, bezpieczeństwo pracy, prostota oraz szybkość działania - wszystko to sprawia, że urządzenie znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających sektorach takich jak laboratoria badawcze, przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, szpitale, kliniki jak również domy opieki i wiele innych.

Właściwości:

- redukcja mikroorganizmów w zależności od wymagań na poziomie 4-log₁₀, 5-log₁₀, 6-log₁₀,
- dostosowanie protokołu pracy urządzenia do osiągnięcia wymagań i założonego poziomu dezynfekcji,
- kontrola i analiza danych - łatwe programowanie i całkowita autonomia z dwoma kryteriami: objętość i stężenie,
- automatyczne obliczanie czasu dyfuzji,
- komunikat o pustym zbiorniku z biocydem,
- technologia wirującego dysku,
- skuteczność potwierdzona pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu oraz zgodnością z normą EN 17-272,
- zapamiętanie różnych stref i programów (m.in. nazwa, objętość, dawka biocydu) dla szybkiego uruchomienia cyklu dezynfekcji,
- technologia **Microdrop®** - technologia nebulizacji suchą mgłą i zoptymalizowany czas kontaktu,
- praca na zasilaniu sieciowym lub baterijnym (opcja),
- zarządzanie - parametry strefy mogą być modyfikowane przez administratora (zabezpieczenie hasłem),
- zdalny monitoring dzięki aplikacji „**MyPhileas®**” - dostępna na laptop (system Windows / Android) lub tablet, wymagana

łączność WiFi:

- zdalna kontrola podczas procesu dekontaminacji,
- możliwość odtwarzania poprzednich raportów z przeprowadzonych procesów,
- informacja o stanie urządzenia,
- możliwość ustawienia do 20-tu kolejnych cykli,
- minimalne wymagania związane z konserwacją dla zapewnienia niezawodnego cyklu dezynfekcji za każdym razem,
- solidna konstrukcja,
- wskazanie: końcowa dezynfekcja po czyszczeniu,
- kompatybilność z płynami do dekontaminacji: **O2SAFE®** i **Phileasafe®**.

MODELE

- **Phileas® 25**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Phileas® 25
Objętość dekontaminowana [m3]	1 do 40
Przepływ [mL/godz.]	700
Czas dyfuzji	20 min dla 20 m3 (przy 12 mL/m3)
Maksymalna ilość cykli	20
Pojemność zbiornika [mL]	500
Moc [W]	30
Zasilanie	sieciowe (230 V / 50 Hz, 1,8 A) lub bateryjne (opcja)
Czas pracy na zasilaniu baterijnym	2 godz. 30 min
Wymiary (W x D x H) [mm]	193 x 475 x 222
Waga [kg]	5
Zastosowanie	▪ przemysł farmaceutyczny, ▪ przemysł spożywczy, ▪ laboratoria badawcze, ▪ izolatory, RABS, BSC, duże śluzy powietrzne, małe pokoje, laboratoria

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **O2SAFE®** (6% H₂O₂),
- **Phileasafe®** (mieszanina 7,4% H₂O₂ oraz 1500 ppm kwas nadoctowy).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl